



VEILIGHEID EN BEWEGINGSVRIJHEID IN EEN NIEUWE DIMENSIE

SPIRAALLIJNEN
MET B. BRAUN
KLEURCODERING

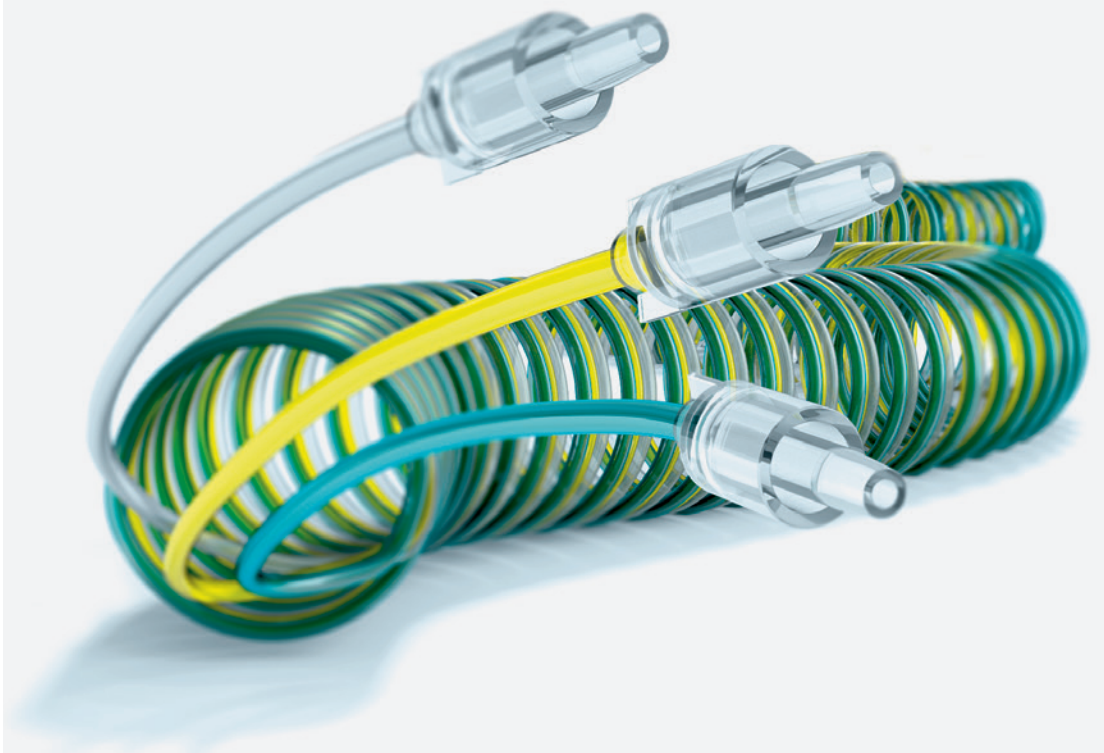

Flexibiliteit en veiligheid

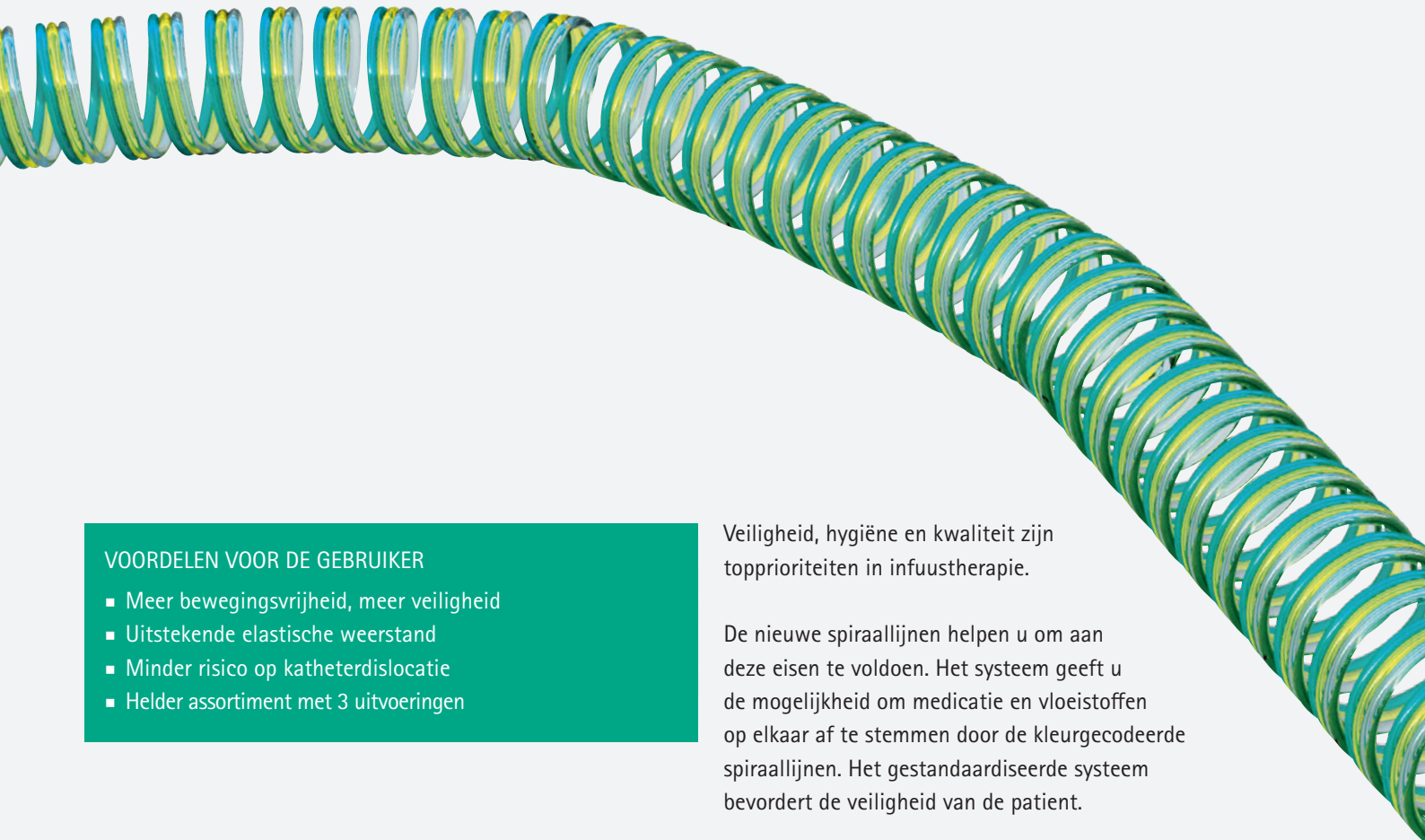

VOORDELEN VOOR DE GEBRUIKER

- Meer bewegingsvrijheid, meer veiligheid
- Uitstekende elastische weerstand
- Minder risico op katheterdislocatie
- Helder assortiment met 3 uitvoeringen

Veiligheid, hygiëne en kwaliteit zijn topprioriteiten in infuustherapie.

De nieuwe spiraallijnen helpen u om aan deze eisen te voldoen. Het systeem geeft u de mogelijkheid om medicatie en vloeistoffen op elkaar af te stemmen door de kleurgecodeerde spiraallijnen. Het gestandaardiseerde systeem bevordert de veiligheid van de patiënt.


De flexibele spiraallijnen geven de patiënt die al mobiel is of het zal worden een optimale bewegingsvrijheid. Dankzij de regelbare lengte van de lijnen kan het mobiliteitsbereik worden aangepast aan de omstandigheden. Tegelijkertijd is er minder risico op katheterdislocatie.

De goede zichtbaarheid van de gekleurde lijnen is een bijkomend veiligheidsaspect voor de patiënt.

Het individuele lumen van dubbele en driedubbele lumenlijnen kan afzonderlijk worden afgekoppeld, zodat het systeem en de therapie gelijke tred kunnen houden met het herstelproces van de patiënt. De resterende lumina worden niet beïnvloed en blijven met het systeem verbonden.

Alle spiraallijnen zijn vrij van PVC en DEHP.




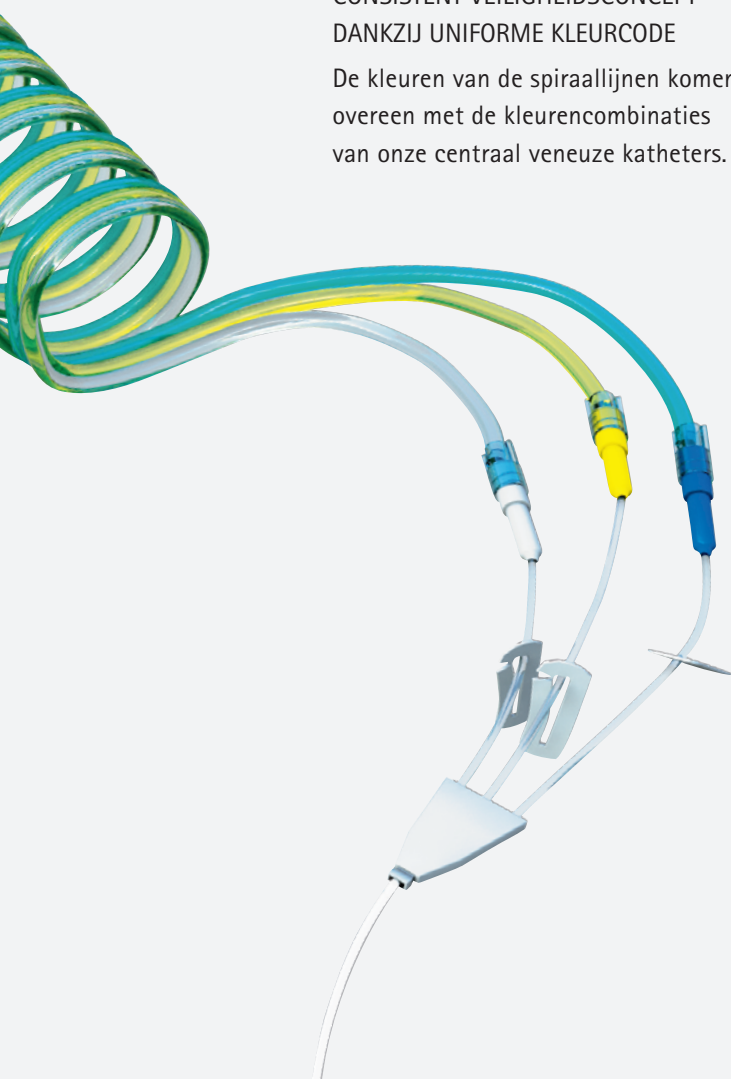

**CONSISTENT VEILIGHEIDSCONCEPT
DANKZIJ UNIFORME KLEURCODE**

De kleuren van de spiraallijnen komen overeen met de kleurencombinaties van onze centraal veneuze katheters.

**SPECIFICATIES DIE DE DAGELIJKSE PROCEDURES VERGEMAK-
KELIJKEN VOOR ZOWEL HET PERSONEEL ALS DE PATIËNT:**

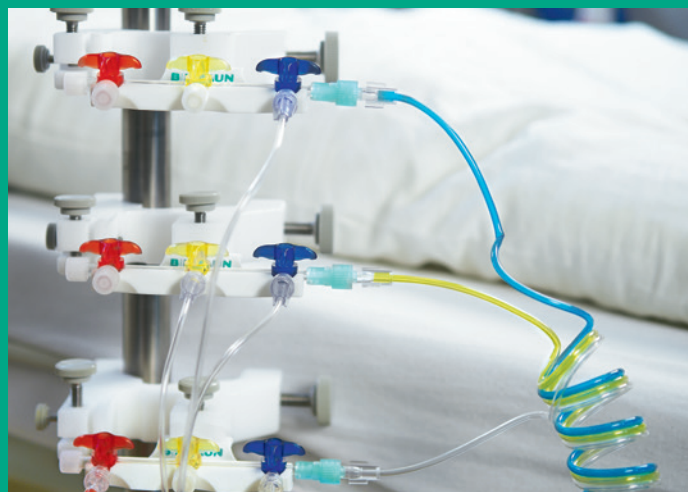

DRIEWEGKRANEN NAAST HET BED

De spiraallijnen en Discofix® C- kranenblokken geven een goed overzicht van het toedieningssysteem. De verschillende kleuren maken het gemakkelijk deze te volgen tot aan de toegang tot de patient. Dankzij de mogelijkheid om afzonderlijke lumina af te koppelen, kan men de therapie aanpassen aan specifieke ontwikkelingen en ruimtelijke omstandigheden.




SPIRAALLIJNEN

Flexibiliteit en betrouwbare elastische weerstand houden rekening met de hygiënische eisen en maken een grote bewegingsvrijheid van de patiënt en klinische behandeling mogelijk.

Productspecificaties

SPIRAALVORMIGE LIJNEN MET KLEURCODE VAN B. BRAUN

ENKELVOUDIG LUMEN	BINNEN Ø	LENGTE (CM)	KLEUR	ARTIKELNUMMER	STUKS/DOOS
	1 mm	150	<input type="checkbox"/>	4092937	50
	1 mm	300	<input type="checkbox"/>	4092945	50
	1 mm	500	<input type="checkbox"/>	4092953	50
	1 mm	700	<input type="checkbox"/>	4092961	50
	1 mm	850	<input type="checkbox"/>	4092970	50
	2 mm	150	<input type="checkbox"/>	4090365	50
	2 mm	300	<input type="checkbox"/>	4090373	50
	2 mm	500	<input type="checkbox"/>	4090438	50
	2 mm	700	<input type="checkbox"/>	4090381	50
	2 mm	850	<input type="checkbox"/>	4090390	50

DUBBEL LUMEN	BINNENDIAM. Ø	LENGTE (CM)	KLEUR	ARTIKELNUMMER	STUKS/DOOS
	1 mm	300	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	4091736	50
	1 mm	300	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	4091752	50
	1 mm	700	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	4093607	50
	1 mm	850	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	4091728	50
	2 mm	300	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	4093830	50
	2 mm	500	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	4093850	40
	2 mm	700	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	4093870	30
	2 mm	850	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	4093885	25

DRIEDUBBEL LUMEN	BINNENDIAM. Ø	LENGTE (CM)	KLEUR	ARTIKELNUMMER	STUKS/DOOS
	1 mm	150	■ ■ □	4093115	50
	1 mm	300	■ ■ □	4093130	50
	1 mm	500	■ ■ □	4093150	50
	1 mm	700	■ ■ □	4093170	50
	1 mm	850	■ ■ □	4093185	50
	2 mm	150	■ ■ □	4093215	50
	2 mm	300	■ ■ □	4093230	50
	2 mm	500	■ ■ □	4093250	40
	2 mm	700	■ ■ □	4093270	25
	2 mm	850	■ ■ □	4093285	25

LENGTES	150 CM	300 CM	500 CM	700 CM	850 CM
Diameter 2x3,2 mm/Vulvolume	4,7 ml	9,9 ml	15,7 ml	22 ml	26,7 ml
Snelheid ml/min (BS)	ca. 61	ca. 40	ca. 28	ca. 20	ca. 17
Diameter 1x1,9 mm/Vulvolume	1,2 ml	2,3 ml	3,9 ml	5,5 ml	6,6 ml
Snelheid ml/min (BS)	ca. 6,0	ca. 3,5	ca. 2,5	ca. 1,7	ca. 1,5

De nieuwe spiraalvormige lijnen met kleurcode zijn het centrale element voor alle functies, met inbegrip van de Discofix® C kranenblokken, de filtering en de patiënttoegang.



B. Braun Medical B.V. | Postbus 659 | 5340 AR Oss
Tel. +31 (0)412 67 24 11 | customer care.nl@bbraun.com | www.bbraun.nl

B. Braun Medical N.V./S.A. | Lambroekstraat 5B | B-1831 Diegem
Tel. +32 (0)2 712 86 15 | customer care.be@bbraun.com | www.bbraun.be